




Patienten CD-Importer

Schneller und unkomplizierter Import von Patienten-CDs

- Intuitiv bedienbare Software zum Einlesen von Patienten CDs
- Rasche Übersicht über die Bilddaten durch ergonomische Oberfläche
- Einfache Möglichkeit zur Änderung von Patientennamen und ID
- Komfortabler Import von PDF und Befunden in das PACS-Archiv
- Optionale Unterstützung der Anbindung an eine DICOM-Worklist

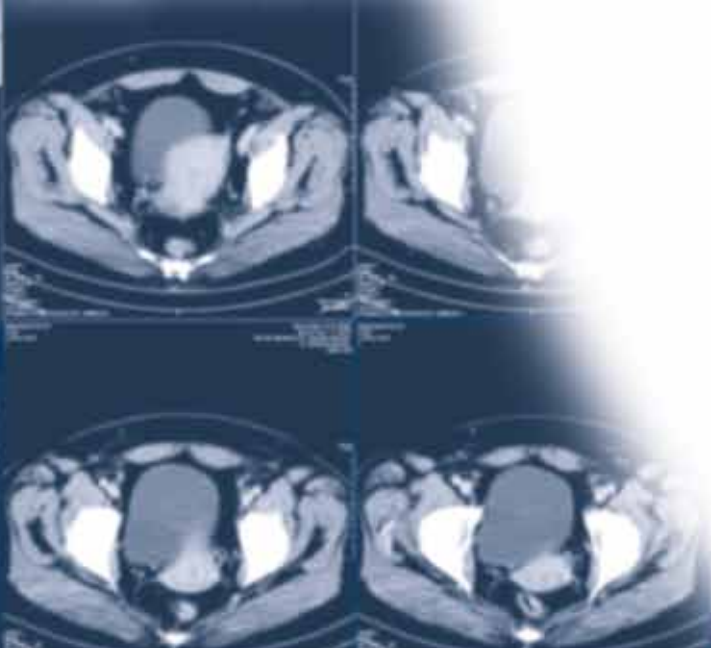

DIGITALE BILDER SIND UNSERE WELT

Der medigration Patienten-CD Importer ist eine intuitiv zu bedienende Software, die es in wenigen Schritten ermöglicht, reibungslos und risikofrei Patienten-CDs einzulesen.

Die ergonomische Benutzeroberfläche ermöglicht eine rasche Übersicht über die jeweiligen Bilddaten. Dadurch können gezielt einzelne Bilder/Studien ausgewählt oder mit einem Klick alle Bilder importiert werden. Neben Patienten-CDs können auch PDF über den CD-Importer schnell und komfortabel im PACS-Archiv gespeichert werden.

Funktionsweise

Der medigration Patienten-CD Importer ermöglicht Ihnen nicht nur den sicheren und reibungslosen Import von Patientendaten in Ihr Archiv, sondern bietet Ihnen auch die Möglichkeit abzufragen, ob ein Patient in Ihrer Worklist für eine Untersuchung hinterlegt ist. Dabei stehen Ihnen sowohl für die Worklist, als auch beim Import ins Archiv und beim Durchsuchen der CD, Suchfelder für den Namen, die ID, das Geburtsdatum und das Geschlecht des Patienten zur Verfügung, um den richtigen Patienten zu finden und diesem die Bilder und PDF zuzuordnen.

Desweiteren haben Sie im Übersichtsbereich die Möglichkeit, mit einem Doppelklick auf ein Bild, dieses zu laden und zu fenstern, hinein zu zoomen oder es zu verschieben. Dies erleichtert Ihnen vor dem Import die Vorauswahl der Bilder und Serien.

Voraussetzungen

Die Patienten-CD Importer Software kann auf jedem beliebigen Arbeitsplatzrechner mit einem Windows Betriebssystem (2000/XP/Win 7) installiert werden. Egal ob die Bilddaten direkt an der Anmeldung oder an einem Befundarbeitsplatz importiert werden, die benutzerfreundliche Software ist universell einsetzbar und läuft problemlos auf allen Arbeitsplätzen.



Ergonomische Benutzeroberfläche zur raschen Orientierung



Gesellschaft für
medizinische Datenverarbeitung
und Integration mbH
Schuhstr. 30
D-91052 Erlangen

Tel: + 49 (0) 91 31 - 6 90 87 - 40
Fax: + 49 (0) 91 31 - 6 90 87 - 50
eMail: info@medigration.de
web: www.medigration.de



Für eine unverbindliche
Beratung stehen wir Ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!